

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(должность)

ООО "АВ ТРАСТ"

(организация)

Якимович Андрей Викторович

(Ф.И.О.)

07.08.2026

(подпись)

(дата)



Инструкция по применению
№ТМВ-006

Тумба медицинская ARTINOX™

1 Справочная информация

1.1 Заявление о правах на интеллектуальную собственность

ЧУП "Артинокс" (далее – производитель) является разработчиком и производителем медицинского изделия «Тумба медицинская ARTINOX™» (далее – изделие) и обладает правами на интеллектуальную собственность в отношении изделия и инструкции по применению.



ARTINOX

и являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащим производителю.

1.2 Предупреждающие сообщения

Символ	Значение
	Внимание! Потенциально опасные ситуации или небезопасные действия, которые могут привести к повреждениям изделия или травмам пользователей
	Примечание: Рекомендации по правильному использованию изделия и/или другие полезные сведения.

1.3 Ответственность производителя

Предполагается, что вся информация, содержащаяся в настоящей инструкции, не содержит ошибок. Производитель несет ответственность за безопасность, надежность и рабочие характеристики изделия только в том случае, если:

- все действия по установке, изменению, модификации, а также ремонтные работы изделия выполняются уполномоченным техническим персоналом производителя;
- изделие используется в соответствии с инструкцией.

1.4 Гарантия

Настоящая гарантия является исключительной и применяется вместо всех прочих гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии товарной пригодности или пригодности для использования по назначению.

1.4.1 Освобождение от ответственности

Согласно настоящей гарантии, обязательства или ответственность производителя не включают в себя ответственность за прямые, косвенные или случайные убытки или задержки, вызванные ненадлежащим использованием изделия или использованием изделий, не рекомендованных к применению производителем, а также ремонтными работами, выполненными лицами, не относящимися к квалифицированному техническому персоналу.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- повреждение или неисправность, обусловленные ненадлежащим использованием изделия или неправильными действиями пользователя;
- повреждение или неисправность, обусловленные форс-мажорными обстоятельствами, такими как пожар или землетрясение;
- неисправность или повреждение в результате выполнения ремонтных работ неквалифицированным или не имеющим полномочий обслуживающим персоналом;
- прочие неполадки, не обусловленные самим изделием или его частью.

1.4.2 Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями, а также правил эксплуатации, приведенных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня продажи.

Срок эксплуатации: 8 лет.

Инструкция по применению	ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™	Страница	3 из 45

За механические повреждения изделия, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, производитель ответственности не несёт.

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за изделием, претензии не принимаются.

2 Контактная информация

2.1 Производитель (разработчик):

Наименование : Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Артинокс» (ЧУП "Артинокс")

Юридический адрес : 223070, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с, д.14, район д. Михановичи.

Данные для направления рекламаций:

Телефон : +375(44)7007744, +375(17)5415231

E-mail : artinox@mail.ru

2.2 Места производства:

Площадка № : 1

Наименование : Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Артинокс» (ЧУП "Артинокс")

Фактический адрес : 223070, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с, д. 14, район д. Михановичи

Площадка № : 2

Наименование : Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Артинокс» (ЧУП "Артинокс")

Фактический адрес : 220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Смоленская, 52

Площадка № : 3

Наименование : Общество с дополнительной ответственностью «Аркодор» (ОДО «Аркодор»)

Фактический адрес : 220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Смоленская, 52

2.3 Уполномоченный представитель:

Наименование : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ ТРАСТ" (ООО "АВ ТРАСТ")

Юридический адрес : 214013, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Матросова, д. 9, офис D1

Данные для направления рекламаций:

Телефон : +7 9156396384,

E-mail : Trastav@gmail.com

3 Меры предосторожности

3.1 Символы, применяемые на маркировке и изделии

Символ	Наименование символа
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Медицинское изделие
	Не допускать воздействия влаги
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Верх
	Логотип производителя

3.2 Меры предосторожности при применении

Соблюдение приведённых ниже мер предосторожности обязательно на всех этапах обращения с изделием. Несоблюдение требований может привести к травмам медицинского персонала и иных лиц, а также к повреждению изделия.

	Общие требования перед использованием ➤ Эксплуатируйте изделие только по назначению, указанному в эксплуатационной документации. ➤ Установите изделие на ровную, твёрдую и устойчивую поверхность, соответствующую условиям эксплуатации (помещение медицинской организации, допустимые типы напольного покрытия и т.п.). ➤ Перед каждым использованием выполняйте краткий визуальный осмотр: • отсутствие трещин, деформаций, выраженной коррозии несущих элементов; • целостность рабочих поверхностей и обивки; • отсутствие ослабленного или отсутствующего крепежа; • исправность подвижных и фиксирующих элементов (при их наличии). При обнаружении дефектов, способных повлиять на безопасность пациента или персонала, эксплуатация изделия не допускается до выявления и устранения причин.
	Нагрузки ➤ Не превышайте максимально допустимую нагрузку, указанную изготовителем. При расчёте учитывайте суммарную массу размещаемых на тумбе материалов, инструментов и оборудования. ➤ Размещайте оборудование, материалы и инструменты в соответствии с назначением и конструкцией изделия, равномерно распределяя массу и избегая чрезмерного смещения к краям или в одну зону. ➤ Не используйте изделие как подмости, подставку для подъёма, подставку для тяжёлого оборудования, сиденье для персонала или иные функции, не предусмотренные эксплуатационной документацией.
	Использование подвижных, регулируемых и фиксирующих элементов (применимо к моделям изделия, имеющим регулируемые/подвижные узлы) ➤ Перед началом эксплуатации убедитесь в корректной работе подвижных и регулируемых узлов (механизмы перемещения, регулировки положения, фиксации). ➤ Фиксирующие элементы должны быть чётко переведены в требуемое положение (включено/выключено, зафиксировано/отпущено) и надёжно удерживаться в нём. ➤ Не допускается эксплуатация изделия с частично включёнными или заведомо неисправными фиксирующими устройствами. ➤ Не используйте элементы мебели как опорные конструкции для подъёма, подтягивания или перемещения персонала либо иных лиц.
	Перемещение изделия (актуально для изделий на колёсных опорах) ➤ Перемещайте изделие с контролируемой скоростью, избегая резких рывков, ускорений и торможений. ➤ Особое внимание уделяйте преодолению порогов, стыков, уклонов и неровностей: • снижайте скорость перед препятствием; • избегайте частичного размещения опор на разных уровнях; • не используйте изделие на лестничных маршах, если это не предусмотрено конструкцией и документацией. ➤ При временной остановке и проведении любых манипуляций включайте предусмотренные конструкцией тормозные или фиксирующие устройства.

Инструкция по применению		ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™		Страница	5 из 45
	Очистка, дезинфекция и условия среды ➤ Выполняйте очистку и дезинфекцию изделия в соответствии с эксплуатационной документацией и локальными нормативными документами медицинской организации. ➤ Используйте только те средства, методы и режимы обработки (концентрация, время экспозиции, кратность), которые указаны производителем и разрешены к применению для данного типа изделий. ➤ Избегайте применения абразивных материалов, агрессивных химических веществ и растворителей, не рекомендованных изготовителем, чтобы не повредить покрытия и материалы. ➤ После обработки удаляйте остатки дезинфицирующих и моющих средств, при необходимости промывая поверхности водой и высушивая изделие перед хранением или последующим использованием. ➤ Соблюдайте установленные изготовителем диапазоны температуры и влажности при эксплуатации, хранении и транспортировании. Избегайте воздействия конденсата, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и агрессивных сред, если иное не предусмотрено документацией.		
	Техническое обслуживание и ремонт ➤ Регулярно проводите осмотр изделия на наличие признаков износа, коррозии, деформаций, ослабления крепежных элементов и ухудшения работы подвижных узлов. ➤ При выявлении дефектов, влияющих на безопасность, немедленно выведите изделие из эксплуатации до проведения оценки технического состояния и ремонта. ➤ Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия, установка нестандартных комплектующих и проведение ремонтных работ, не предусмотренных эксплуатационной документацией. Ремонт ответственных узлов должен выполняться уполномоченным персоналом в соответствии с требованиями изготовителя. ➤ Соблюдайте установленный изготовителем срок службы изделия и критерии предельного состояния. По достижении срока службы или при наличии признаков предельного состояния изделие подлежит оценке технического состояния и, при необходимости, выводу из эксплуатации и утилизации.		
	Обучение и организационные аспекты ➤ К работе с изделием допускается только персонал, прошедший обучение и ознакомленный с эксплуатационной документацией, локальными инструкциями по обращению с изделием, а также мерами по инфекционной и общей безопасности. ➤ Рекомендуется проводить регулярные инструктажи по: • безопасному использованию изделия; • правильному выполнению очистки и дезинфекции; • действиям при обнаружении неисправностей и нестандартных ситуаций. ➤ Рекомендуется документировать обучение (инструктаж) персонала в соответствии с внутренними процедурами медицинской организации.		

3.3 Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

	Эксплуатация	Хранение	Транспортировка
Температура, °C	от + 10 до + 35	от + 5 до + 40	от – 50 до + 50
Относительная влажность, %	до 80 при + 25 °C	от 45 до 75	до 80 при + 25 °C

- Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.
При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
- Воздух помещения при хранении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

4 **Общая информация об изделии**

4.1 *Наименование медицинского изделия*

Тумба медицинская ARTINOX™
Комплектацию изделия указана в разделе 15.

4.2 *Классификация медицинского изделия*

Класс риска	:	1
Стерильность	:	Нестерильные изделия для многократного применения, устойчивые к дезинфекции. Нестерильные, стерилизации не подлежат.
Контакт по ГОСТ ISO 10993-1-2021:	:	Изделие не имеет непосредственного контакта с пациентом.

Изделия являются изделиями многократного применения.
Повторное применение разрешены.
Изделие не содержит в своем составе материалов животного или человеческого происхождения, биологических материалов, лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

5 Назначение и область применения

5.1 Назначение изделия

Изделие предназначено для хранения медицинских инструментов, материалов в помещениях с повышенными санитарными требованиями, с целью обеспечения безопасного и эффективного проведения медицинских процедур при обязательной возможности дезинфекции.

5.2 Область применения

Тип тумбы	Тумба медицинская Тумба угловая Тумба навесная Тумба навесная угловая	Тумба с мойкой Тумба с мойкой угловая Тумба умывальник	Тумба гипсовочная	Тумба анестезиолога
Область применения	• акушерство и гинекология, • андрология, • аллергология и иммунология, • анестезиология и реаниматология, • гастроэнтерология, • гематология, • дерматовенерология, • инфекционные болезни, • кардиология, • колопроктология, • косметология, • лечебная физкультура, • медицинский массаж, • медицинская реабилитация, • неврология, • неонатология, • нефрология, • онкология, • оториноларингология, • офтальмология, • педиатрия, • психиатрия, • пульмонология, • радиология, • радиотерапия, • ревматология, • стоматология, • терапия, • токсикология, • травматология и ортопедия, • трансфузиология, • урология, • физиотерапия, • фтизиатрия, • хирургия, • ангиохирургия, • пластическая хирургия, • нейрохирургия, • хирургия ожогов, • челюстно-лицевая хирургия, • сердечно-сосудистая хирургия, • эндокринология, • эндоскопия, • лабораторная диагностика, • лучевая диагностика, • ультразвуковая диагностика, • функциональная диагностика, • скорая медицинская помощь	• акушерство и гинекология, • аллергология и иммунология, • анестезиология и реаниматология, • гастроэнтерология, • дерматовенерология, • инфекционные болезни, • кардиология, • колопроктология, • косметология, • медицинская реабилитация, • неврология, • неонатология, • онкология, • оториноларингология, • офтальмология, • педиатрия, • пульмонология, • ревматология, • стоматология, • терапия, • токсикология, • травматология и ортопедия, • урология, • физиотерапия, • фтизиатрия, • хирургия, • ангиохирургия, • пластическая хирургия, • нейрохирургия, • хирургия ожогов, • челюстно-лицевая хирургия, • сердечно-сосудистая хирургия, • эндокринология, • эндоскопия, • лабораторная диагностика, • ультразвуковая диагностика, • функциональная диагностика, • скорая медицинская помощь	• травматология и ортопедия, • хирургия, • ангиохирургия, • нейрохирургия, • хирургия ожогов, • челюстно-лицевая хирургия, • сердечно-сосудистая хирургия, • онкология, • медицинская реабилитация, • спортивная медицина	• анестезиология и реаниматология, • хирургия, • ангиохирургия, • нейрохирургия, • сердечно-сосудистая хирургия, • онкология, • кардиология, • травматология и ортопедия, • трансплантология

5.3 Условия применения

Больница, здравоохранительное учреждение.

5.4 Принцип действия

Принцип действия тумбы медицинской ARTINOX™ основан на её конструктивном исполнении и использовании устойчивых к дезинфекции материалов и заключается в следующем:

- Жёсткий несущий каркас и корпус обеспечивают равномерное восприятие нагрузки, устойчивость и сохранение геометрии изделия при размещении на нём медицинских инструментов, материалов, медикаментов и оборудования в пределах допустимых нагрузок.
- Верхняя рабочая поверхность (столешница) и внутренние объёмы тумбы (полки, отсеки, ниши, ящики) формируют организованное пространство для хранения, систематизации и быстрого доступа к содержимому.
- Выдвижные ящики, полки, дверцы и иные подвижные/открывающиеся элементы (при наличии) обеспечивают удобное размещение и сортировку медицинских изделий и расходных материалов с возможностью быстрого получения к ним доступа в процессе работы медицинского персонала.
- Рабочие поверхности тумбы изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию дезинфицирующих средств и моющих растворов, обладающих гладкой, легко очищаемой поверхностью, что позволяет соблюдать

Инструкция по применению		ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™		Страница	8 из 45

санитарно-гигиенические требования и снижать риск перекрёстного загрязнения.

- Для моделей с мойкой наличие встроенной мойки и смесителя обеспечивает возможность выполнения гигиенических и санитарных процедур (мытьё рук, инструментов, посуды и др.) непосредственно на изделии с последующей дезинфекцией контактных поверхностей.
- Для моделей на колёсных опорах колесная база с тормозными устройствами обеспечивает перемещение тумбы внутри помещения и надёжную фиксацию в рабочем положении, что повышает удобство организации рабочего пространства и безопасность эксплуатации.

Таким образом, тумба медицинская ARTINOX™ функционирует как прочное, устойчивое, легко очищаемое и при необходимости мобильное изделие для хранения, систематизации и оперативного доступа к медицинским инструментам, материалам и медикаментам в помещениях с повышенными санитарными требованиями.

5.5 Потенциальный пользователь

Изделие предназначено для использования врачами, средним и младшим медицинским персоналом медицинских организаций.

Пациенты и их законные представители изделием самостоятельно не пользуются и не рассматриваются как операторы изделия.

Пользователь должен иметь соответствующую профессиональную подготовку, быть ознакомлен с эксплуатационной документацией и локальными инструкциями учреждения по безопасной транспортировке и инфекционной безопасности.

5.6 Показания к применению

Тип тумбы	Показания к применению
Тумба медицинская Тумба угловая	Изделие применяется: • для хранения, размещения и упорядочивания медицинских изделий и расходных материалов, не требующих специальных условий хранения; • для раздельного размещения медицинских изделий и расходных материалов по видам, назначению или режиму использования; • для временного размещения подготовленных к использованию медицинских изделий и принадлежностей в процессе выполнения медицинских манипуляций; • в ситуациях, когда требуется возможность санитарной обработки и дезинфекции поверхностей мебели.
Тумба с мойкой Тумба с мойкой угловая	Изделие применяется: • для гигиенической и санитарной обработки рук медицинского персонала с использованием проточной воды, моющих и (или) дезинфицирующих средств; • для выполнения вспомогательных операций по мойке и ополаскиванию нестерильных принадлежностей в объёме, установленном локальными актами медицинской организации; • для хранения и размещения средств и принадлежностей для гигиенической обработки рук, предназначенных к использованию в текущий период работы; • в ситуациях, когда требуется совмещение рабочей поверхности и узла для обработки рук при обязательной возможности дезинфекции всех контактных поверхностей.
Тумба навесная Тумба навесная угловая	Изделие применяется: • для хранения и размещения медицинских изделий, расходных материалов и принадлежностей в навесном исполнении над рабочими поверхностями, при условии что они не требуют специальных условий хранения; • для оптимизации использования площади и снижения загрязнения за счёт размещения вне напольной зоны; • для раздельного размещения медицинских изделий и расходных материалов по категориям, режимам использования или степени готовности к применению; • в ситуациях, когда требуется возможность регулярной дезинфекции наружных и внутренних поверхностей навесной мебели.
Тумба гипсовочная	Изделие применяется: • для размещения гипсовых бинтов, порошков, ёмкостей и инструментов, используемых при изготовлении и наложении гипсовых повязок и ортопедических изделий; • для подготовки гипсовых растворов и временного размещения форм и изделий в процессе их изготовления и твердения; • для временного размещения и сортировки гипсовых отходов до их передачи на утилизацию в установленном порядке; • в ситуациях, когда требуется работа с гипсовыми материалами при обязательной возможности регулярной дезинфекции поверхностей и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Тумба анестезиолога	Изделие применяется: • для организации рабочего пространства анестезиолога при проведении анестезиологического пособия и интенсивной терапии; • для размещения комплектов медицинских изделий и расходных материалов, используемых при проведении анестезии и мониторинге состояния пациента, не требующих специальных условий хранения; • для временного размещения лекарственных препаратов в их оригинальной упаковке производителя на период подготовки и проведения анестезиологического пособия; • в ситуациях, когда требуется возможность дезинфекции всех доступных поверхностей между использованием у разных пациентов.
Тумба умывальник	Изделие применяется: • для гигиенической и санитарной обработки рук медицинского персонала и, при необходимости, пациентов с использованием проточной воды, моющих и (или) дезинфицирующих средств; • для выполнения предусмотренных локальными актами медицинской организации гигиенических процедур, связанных с обработкой кожных покровов; • для размещения средств гигиены рук и принадлежностей для их применения, предназначенных к использованию в текущий период работы; • в ситуациях, когда требуется дезинфекция всех контактных поверхностей умывальника и тумбы после использования.

5.7 Противопоказания

- Не использовать изделие не по назначению.
- При эксплуатации изделия не допускается превышать допустимые нагрузки.

5.8 Побочные эффекты

- При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно эксплуатационной документации – побочные действия отсутствуют.

6 Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ:	«от ... до ...»	—	указывает на возможность регулировки определённого параметра изделия (например, высоты, длины), если такая функция предусмотрена конструкцией.
	±10%	—	неуказанный допуск параметров
	ТП	—	труба профильная
	НС	—	нержавеющая сталь
	УС	—	углеродистая сталь
	АІ	—	алюминий
	БП	—	без покрытия
	КПЭП	—	краска порошковая эпоксидно-полиэфирная Цвет: RAL 1000, RAL 1001, RAL 1002, RAL 1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 1007, RAL 1011, RAL 1012, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 1016, RAL 1017, RAL 1018, RAL 1019, RAL 1020, RAL 1021, RAL 1023, RAL 1024, RAL 1027, RAL 1028, RAL 1032, RAL 1033, RAL 1034, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2001, RAL 2002, RAL 2003, RAL 2004, RAL 2008, RAL 2009, RAL 2010, RAL 2011, RAL 2012, RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, RAL 3005, RAL 3007, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3012, RAL 3013, RAL 3014, RAL 3015, RAL 3016, RAL 3017, RAL 3018, RAL 3020, RAL 3022, RAL 3027, RAL 3028, RAL 3031, RAL 4001, RAL 4002, RAL 4003, RAL 4004, RAL 4005, RAL 4006, RAL 4007, RAL 4008, RAL 4009, RAL 4010, RAL 5000, RAL 5001, RAL 5002, RAL 5003, RAL 5004, RAL 5005, RAL 5007, RAL 5008, RAL 5009, RAL 5010, RAL 5011, RAL 5012, RAL 5013, RAL 5014, RAL 5015, RAL 5017, RAL 5018, RAL 5019, RAL 5020, RAL 5021, RAL 5022, RAL 5023, RAL 5024, RAL 6000, RAL 6001, RAL 6002, RAL 6003, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6006, RAL 6007, RAL 6008, RAL 6009, RAL 6010, RAL 6011, RAL 6012, RAL 6013, RAL 6014, RAL 6015, RAL 6016, RAL 6017, RAL 6018, RAL 6019, RAL 6020, RAL 6021, RAL 6022, RAL 6024, RAL 6025, RAL 6026, RAL 6027, RAL 6028, RAL 6029, RAL 6032, RAL 6033, RAL 6034, RAL 6037, RAL 7000, RAL 7001, RAL 7002, RAL 7003, RAL 7004, RAL 7005, RAL 7006, RAL 7008, RAL 7009, RAL 7010, RAL 7011, RAL 7012, RAL 7013, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7022, RAL 7023, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7030, RAL 7031, RAL 7032, RAL 7033, RAL 7034, RAL 7035, RAL 7036, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7039, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7043, RAL 7044, RAL 7045, RAL 7046, RAL 7047, RAL 8000, RAL 8001, RAL 8002, RAL 8003, RAL 8004, RAL 8007, RAL 8008, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8022, RAL 8023, RAL 8024, RAL 8025, RAL 8028, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9011, RAL 9016, RAL 9017, RAL 9018.
Сокращения материалов	ПФ	—	постформинг
	Ст.	—	Стекло
	В	—	высота
	Вб	—	высота бортика
	Вф	—	высота фасада
	Г	—	глубина
	ø	—	диаметр
	Др	—	диапазон регулировки
	Д	—	длина
	Т	—	толщина
Сокращения параметров	Ш	—	ширина



AR-01



AR-02



AR-03



AR-04



AR-04B



AR-04D

AR-01, AR-02, AR-03, AR-04, AR-04B, AR-04D: технические параметры

Параметр	AR-01	AR-02	AR-03	AR-04	AR-04B	AR-04D
► Материалы						
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС
столешница	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ
дверь	—	—	УС	УС	УС	НС , УС
мойка	—	—	—	НС	НС	НС
ящик	УС	УС	УС	—	—	УС
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	БП, КПЭП
► Габаритные параметры, см						
изделие, Д×Ш×В	50×60×90	50×60×90	55×60×90	50×60×90	50×60×90	50×60×90
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т	50×60×2,6	50×60×2,6	55×60×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6
бортик столешницы, В	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)
дверь, Ш×В×Т	—	—	1 шт., распашная: 50,5×58,8×1,5	1 шт., распашная: 45,5×72,8×1,5	1 шт., откидная: 45,5×72,8×1,5	1 шт., дверь: 45,5×36,0×1,3 шторка: 32,8×18,2×1,3
мойка, Ш×Г×В	—	—	—	1 шт.: 49×49×16	1 шт.: 49×49×16	1 шт.: 49×49×16
смеситель, В×ø	—	—	—	1 шт., локтевой: 18,8×5	1 шт., локтевой: 18,8×5	1 шт., локтевой: 18,8×5
ящик, Ш×Г×В×Вф	6 шт. (2+3+1): 1-2: 41,6×43×5,0×6; 3-5: 41,6×43×6,7×12; 6: 41,6×43×18×23,5	4 шт. (3+1): 1-3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×30,6×36,3	1 шт.: 46,5×43×6,7×12	—	—	1 шт.: 41,5×43×30,6×36,3
ниша, Ш×Г×В	—	—	45×48×55	—	—	—
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	52×64×92	52×64×92	57×64×92	52×64×92	52×64×92	51×61×91
замок (опционально), шт.	от 1 до 3	от 1 до 3	1	—	—	—
► Масса, кг						
изделия	47,3	46	22	30	32,5	29,3
брутто, не более	60	56	25	35	35	32
► Устанавливается на (см)						
опоры, В×ø×Др. регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
► Максимальная нагрузка, кг						
изделие	80	80	80	80	80	80
столешница	40	40	40	40	40	40
дверь	—	—	3	3	3	3
мойка	—	—	—	20	20	20
ящик	15	15	15	—	—	15
► Усилия, Н (кгс)						
выдвигания ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	—	не более 50 (5)



AR-04Y



AR-04YB



AR-05



AR-05Y



AR-06



AR-07

AR-04Y, AR-04YB, AR-05, AR-05Y, AR-06, AR-07: технические параметры

Параметр	AR-04Y	AR-04YB	AR-05	AR-05Y	AR-06	AR-07
► Материалы						
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС
столешница	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ
дверь	УС	УС	УС	УС	УС	—
мойка	НС	НС	—	—	—	—
ящик	—	—	—	—	—	УС
полка	—	—	УС	УС	Ст.	—
корзина для отходов	—	УС	—	—	—	—
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
► Габаритные параметры, см						
изделие, Д×Ш×В	84,5×84,5×90	84,5×84,5×90	50×60×90	84,5×84,5×90	50×60×90	50×60×90
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т	84,5×84,5×2,6	84,5×84,5×2,6	50×60×2,6	84,5×84,5×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6
бортик столешницы, В	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)
дверь, Ш×В×Т	1 шт., распашная: 35,4×72,5×1,9	1 шт., откидная: 35,4×72,5×1,9	1 шт., распашная: 45,5×72,8×1,5	1 шт., распашная: 35,4×72,5×1,9	1 шт., распашная: 45,5×72,8×1,5	—
мойка, Ш×Г×В	1 шт.: 49×49×16	1 шт.: 49×49×16	—	—	—	—
смеситель, В×ø	1 шт., локтевой: 18,8×5	1 шт., локтевой: 18,8×5	—	—	—	—
ящик, Ш×Г×В×Вф	—	—	—	—	—	10 шт. (9+1) 1-9: 41,6×43×5,0×6; 10: 41,6×43×6,7×12;
полка, Ш×Г×Т×Вб	—	—	2 шт.: 42,2×48×0,13×1,5	1 шт.: 105,3×47,7×0,13×1,5	2 шт.: 42,2×48×0,5	—
корзина для отходов, Ш×Г×В	—	30,2×24,8×49	—	—	—	—
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковки, Д×Ш×В	85,5×85,5×91	85,5×85,5×91	52×62×92	85,5×85,5×91	52×62×92	52×62×92
замок (опционально), шт.	—	—	1	—	1	от 1 до 3
► Масса, кг						
изделия	35	38,5	35	39,8	35	49
брутто, не более	40	42	38	43	38	52
► Устанавливается на (см)						
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
► Максимальная нагрузка, кг						
изделие	80	80	80	80	80	80
столешница	40	40	40	40	40	40
дверь	3	3	3	3	3	—
мойка	20	20	—	—	—	—
ящик	—	—	—	—	—	15
полка	—	—	10	10	5	—
► Усилия, Н (кгс)						
выдвигания ящика	—	—	—	—	—	не более 50 (5)



AR-08, AR-09, AR-10, AR-11, AR-13, AR-14: технические параметры

Параметр	AR-08	AR-09	AR-10	AR-11	AR-13	AR-14
► Материалы						
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС
столешница	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ
ящик	УС	УС	УС	—	УС	УС
дверь	—	—	УС	Ст. +Al	—	—
полка	—	—	—	Ст.	—	—
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
► Габаритные параметры, см						
изделие, Д×Ш×В	50×60×90	50×60×90	50×60×90	50×60×90	50×60×90	50×60×90
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т	50×60×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6
бортик столешницы, В	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)
ящик, Ш×Г×В×Вф	11 шт.: 41,6×43×3,6×4,65	2 шт. (1+1) 1: 41,6×43×6,7×12 2: 41,6×43×19,1×24,5	1 шт.: 41,5×43×30,6×36,3	—	2 шт.: 41,6×43×30,6×36,3	4 шт. (1+3): 1: 41,6×43×30,6×36,3 2-4: 41,6×43×6,7×12
дверь, Ш×В×Т	—	—	1 шт., дверь: 45,5×36,0×1,3 шторка: 32,8×18,2×1,3	1 шт., распашная (рамка со стеклом): 45,5×72,8×2,1	—	—
полка, Ш×Г×Т×Вб	—	—	—	2 шт.: 42,2×48×0,5	—	—
ниша, Ш×В×Г	—	46×34,5×50	—	—	—	—
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	52×62×92	52×62×92	52×62×92	52×62×92	52×62×92	52×62×92
замок (опционально), шт.	от 1 до 3	1	—	1	1	от 1 до 3
► Масса, кг						
изделия	50	30	23	32	35	42
брутто, не более	52	33	26	35	37	45
► Устанавливается на (см)						
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
► Максимальная нагрузка, кг						
изделие	80	80	80	80	80	80
столешница	40	40	40	40	40	40
ящик	15	15	15	—	20	20
дверь	—	—	3	3	—	—
полка	—	—	—	5	—	—
► Усилия, Н (кгс)						
выдвигания ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)



AR-15, AR-16, AR-17, AR-18, AR-19, AR-20: технические параметры

Параметр	AR-15	AR-16	AR-17	AR-18	AR-19	AR-20
► Материалы						
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС
столешница	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ
ящик	УС	УС	УС	—	УС	УС
дверь	—	—	—	УС	УС	УС
полка	—	—	—	УС	УС	УС
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
► Габаритные параметры, см						
изделие, Д×Ш×В	50×60×90	50×60×90	50×60×90	60×60×90	50×60×90	50×60×90
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т	50×60×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6	60×60×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6
бортик столешницы, В	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)
ящик, шт., Ш×Г×В×Вф	5 шт. (2+2+1): 1-2: 41,6×43×5,0×6 3-4: 41,6×43×6,7×12 5: 41,6×43×30,6×36,3	5 шт. (4+1): 1-4: 41,6×43×6,7×12 5: 41,6×43×18×23,5	7 шт. (4+2+1) 1-4: 41,6×43×5,0×6 5-6: 41,6×43×6,7×12 7: 41,6×43×18×23,5	—	1 шт.: 41,6×43×6,7×12	2 шт.: 41,6×43×5,0×6
дверь, Ш×В×Т	—	—	—	1 шт., распашная: 35,1×72,5×1,9	1 шт., распашная: 45,5×58,8×1,5	1 шт., распашная: 45,5×58,8×1,5
полка, Ш×Г×Т×Вб	—	—	—	25×40×0,13×1,5	1 шт. 42,2×48×0,13×1,5	1 шт. 42,2×48×0,13×1,5
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	52×62×92	52×62×92	52×62×92	62×62×92	52×62×92	52×62×92
замок (опционально), шт.	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	—	1	от 1 до 3
► Масса, кг						
изделия	45	45	48	25	35	35
брутто, не более	48	48	51	28	38	38
► Устанавливается на (см)						
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
► Максимальная нагрузка, кг						
изделие	80	80	80	80	80	80
столешница	40	40	40	40	40	40
ящик	15	15	15	—	15	15
дверь	—	—	—	3	3	3
полка	—	—	—	15	10	10
► Усилия, Н (кгс)						
выдвигания ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)



AR-21



AR-23



AR-24



AR-24/1



AR-25



AR-26



AR-27

AR-21, AR-23, AR-24, AR-24/1, AR-25, AR-26, AR-27: технические параметры

Параметр	AR-21	AR-23	AR-24	AR-24/1	AR-25	AR-26	AR-27
► Материалы							
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС	УС
столешница	ПФ	ПФ	ПФ	НС	ПФ	ПФ	ПФ
ящик	УС	—	—	—	—	—	—
дверь	—	УС	УС	УС	УС	УС	УС
полка	—	—	—	—	УС	—	—
мойка	—	—	НС	НС	—	НС	НС
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
► Габаритные параметры, см							
изделие, Д×Ш×В	50×60×90	50×60×90	100×60×90	100×60×90	100×60×90	100×60×90	100×60×90
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т	50×60×2,6	50×60×2,6	100×60×2,6	100×60×1,7	100×60×2,6	100×60×2,6	100×60×2,6
бортик столешницы, В	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)
ящик, Ш×Г×В×Вф	3 шт.: 41,6×43×18,2×24,1	—	—	—	—	—	—
дверь, Ш×В×Т	—	1 шт., распашная: 45,5×72,8×1,5	2 шт., распашные: 47,7×72,8×1,5	2 шт., распашные: 47,7×72,8×1,5	2 шт., распашные: 47,7×72,8×1,5	2 шт., распашные: 47,7×72,8×1,5	2 шт., распашные: 47,7×72,8×1,5
полка, Ш×Г×Т×Вб	—	—	—	—	2 шт.: 92,5×48×0,13×1,5	—	—
мойка, Ш×Г×В	—	—	2 шт.: 49×49×16	2 шт.: 49×49×16	—	1 шт.: 49×49×16	1 шт.: 49×49×16
смеситель, В×ø	—	—	2 шт., локтевой: 18,8×5	2 шт., локтевой: 18,8×5	—	1 шт., локтевой: 18,8×5	1 шт., локтевой: 18,8×5
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	52×62×92	52×62×92	102×62×92	102×62×92	102×62×92	102×62×92	102×62×92
замок (опционально), шт.	от 1 до 3	1	—	—	1	—	—
► Масса, кг							
изделия	45	33	40	40	31	32,5	32,5
брутто, не более	50	37	60	60	40	40	40
► Устанавливается на (см)							
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
► Максимальная нагрузка, кг							
изделие	40	40	40	40	40	40	40
столешница	30	30	30	30	30	30	30
ящик	15	—	—	—	—	—	—
дверь	—	3	3	3	3	3	3
полка	—	—	—	—	10	—	—
мойка	—	—	20	20	—	20	20
► Усилия, Н (кгс)							
выдвигания ящика	не более 50 (5)	—	—	—	—	—	—

Инструкция по применению				ТМВ-006		
Тумба медицинская ARTINOX™				Страница		15 из 45
 AR-28  AR-29  AR-38  AR-39  AR-40  AR-41						
AR-28, AR-29, AR-38, AR-39, AR-40, AR-41: технические параметры						
Параметр	AR-28	AR-29	AR-38	AR-39	AR-40	AR-41
► Материалы						
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС
столешница	ПФ	ПФ	УС, Стекло (на столешнице сверху)	УС, Стекло (на столешнице сверху)	УС, Стекло (на столешнице сверху)	УС, Стекло (на столешнице сверху)
ящик	—	УС	УС	УС	УС	УС
дверь	Ст. +А1	—	—	—	—	—
полка	Ст.	—	—	—	—	—
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
► Габаритные параметры, см						
изделие, Д×Ш×В	100×60×90	100×60×90	50×50×110	50×50×110	50×50×90	50×50×90
каркас, Т	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
столешница, Д×Ш×Т	100×60×2,6	100×60×2,6	50×50×0,13	50×50×0,13	50×50×0,13	50×50×0,13
бортик столешницы, В	2 (опционально)	2 (опционально)	1,8	1,8	1,8	1,8
ящик, Ш×Г×В×Вф	—	3 шт.: 91,5×43×18,2×24,1	5 шт. (4+1) 1-4: 41,6×43×6,7×12; 5: 41,6×43×18,0×23,5	6 шт. (2+3+1): 1-2: 41,6×43×5,0×6 3-5: 41,6×43×6,7×12 6: 41,6×43×18,0×23,5	2 шт.: 41,6×43×30,6×36,3	4 шт. (3+1): 1-3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×30,6×36,3
дверь, Ш×В×Т	2 шт., распашная (рамка со стеклом): 47,6×72,8×2,1	—	—	—	—	—
полка, Ш×Г×Т×Вб	2 шт.: 92,5×47,4×0,5	—	—	—	—	—
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
ручка для перемещения, Д×Ш×Т	—	—	2 шт., на лицевой панели: 15×2,7×1	1 шт. на лицевой панели: 29×3,0×1,5	2 шт., на боковой панели: 15×2,7×1	2 шт., на боковой панели: 15×2,7×1
упаковка, Д×Ш×В	102×62×92	102×62×92	53,5×53,5×111,0	53,5×53,5×111,0	51×51×91	51×51×91
замок (опционально), шт.	1	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	1	от 1 до 3
► Масса, кг						
изделия	49,8	63,3	49	49,6	29,2	32,7
брутто, не более	57	70	53	53	36	40
► Устанавливается на (см)						
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	—	—	—	—
колеса, Т×ø	—	—	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт., (2 с тормозом): 1,9×5
► Максимальная нагрузка, кг						
изделие	40	40	40	40	40	40
столешница	30	30	30	30	30	30
ящики	—	15	15	15	15	15
дверь	3	—	—	—	—	—
полка	5	—	—	—	—	—
► Усилия, Н (кгс)						
выдвигания ящика	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)
трогания	—	—	не более 75 (7,5)	не более 75 (7,5)	не более 75 (7,5)	не более 75 (7,5)
включения блокировки	—	—	не более 100 (10)	не более 100 (10)	не более 100 (10)	не более 100 (10)
перемещения при блокировке	—	—	не менее 120 (12)	не менее 120 (12)	не менее 120 (12)	не менее 120 (12)

Инструкция по применению	ТМБ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™	Страница	16 из 45



AR-42



AR-43



AR-44



AR-45



AR-45-1




AR-51



AR-51.1


AR-42, AR-43, AR-44, AR-45, AR-45-1, AR-51, AR-51.1: технические параметры

Параметр	AR-42	AR-43	AR-44	AR-45	AR-45-1	AR-51	AR-51.1
► Материалы							
каркас	УС	УС	УС	УС	НС	УС	УС
столешница	УС, Стекло (на столешнице сверху)	УС, Стекло (на столешнице сверху)	УС, Стекло (на столешнице сверху)	НС	НС	—	—
ящики	УС	УС	УС	УС	НС	—	—
дверь	УС	УС	—	—	—	УС	УС
полка	УС	УС	—	—	—	УС	Ст.
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	БП	КПЭП	КПЭП
► Габаритные параметры, см							
изделие, Д×Ш×В	100×50×90	100×50×90	100×50×90	96×53×90	96×53×90	50×35×46,6	50×35×46,6
каркас,	0,15	0,15	0,15	0,12	0,1	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т	100×50×0,15	100×50×0,15	100×50×0,15	96×53×1,7	96×53×1,7	—	—
бортик столешницы, В	1,6	1,6	1,6	5,5	5,5	—	—
ящики, Ш×Г×В×Вф	2 шт.: 41,6×43×30×36	4 шт. (3+1) 1-3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×30×36	4 шт.: 41,6×43×30×36	6 шт.: 40,6×43×12×18,7	6 шт.:40,6×43×12×18,7	—	—
дверь, Ш×В×Т	1 шт., распашная: 45,5×72,8×2	1 шт., распашная: 45,5×72,8×2	—	—	—	1 шт., распашная: 45,6×42,2×1,5	1 шт., подъёмная: 45×44,1×2
полка, Ш×Г×Т×Вб	2 шт. 42,2×48×0,13×1,5	2 шт. 42,2×48×0,13×1,5	—	—	—	1 шт.: 42,4×31,5×0,13×1,5	1 шт.: 45,3×30,6×0,5
ниша, Ш×В×Т	—	—	—	44,7×52,0×36,0	44,7×52,0×36,0	—	—
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	—
ручка для перемещения, Д×Ш×Т	2 шт., боковая сторона корпуса: 15×2,7×1	2 шт., боковая сторона корпуса: 15×2,7×1	2 шт., боковая сторона корпуса: 15×2,7×1	1 шт., боковая сторона корпуса, 54×7×2	2 шт., боковые стороны корпуса, 54×7×2	—	—
упаковки, Д×Ш×В	105×57×92	105×57×92	105×57×92	106×57×92	106×57×92	51×36×47,6	51×36×47,6
замок (опционально), шт.	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	1	—
► Масса, кг							
изделия	60	64,4	62	73,6	73,6	15	15
брутто, не более	65	67	65	77	77	20	20
► Устанавливается на (см)							
опоры, В×ø×Др, регулируемые	—	—	—	—	—	—	—
колеса, Т×ø	4 шт., (2 с тормозом): 2,5×7,5	4 шт., (2 с тормозом): 2,5×7,5	4 шт., (2 с тормозом): 2,5×7,5	4 шт. (2 с тормозом): 1,9×5	4 шт. (2 с тормозом): 2,5×7,5	—	—
навесная	—	—	—	—	—	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм
► Максимальная нагрузка, кг							
изделие	40	40	40	40	40	20	20
столешница	30	30	30	30	30	—	—
ящики	15	15	15	15	15	—	—
дверь	3	3	—	—	—	3	3
полка, Ст. / Ме	10	10	—	—	—	10	5
► Усилия, Н (кгс)							
выдвижения ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	—
трогания	не более 75 (7,5)	не более 75 (7,5)	не более 75 (7,5)	не более 75 (7,5)	не более 75 (7,5)	—	—
включения блокировки	не более 100 (10)	не более 100 (10)	не более 100 (10)	не более 100 (10)	не более 100 (10)	—	—
перемещения при блокировке	не менее 120 (12)	не менее 120 (12)	не менее 120 (12)	не менее 120 (12)	не менее 120 (12)	—	—

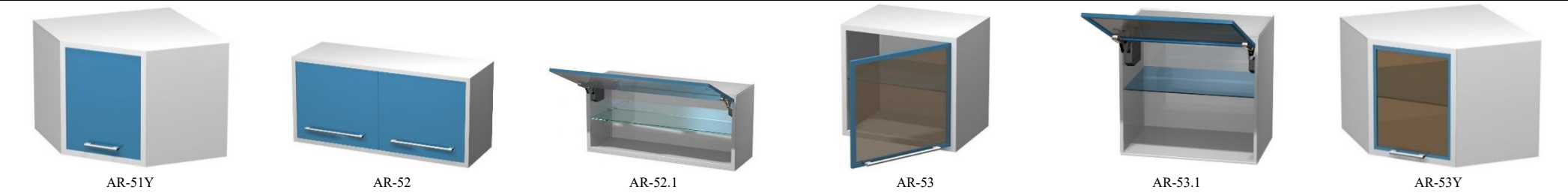

AR-51Y, AR-52, AR-52.1, AR-53, AR-53.1, AR-53Y: технические параметры

Параметр	AR-51Y	AR-52	AR-52.1	AR-53	AR-53.1	AR-53Y
► Материалы						
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС
полка	УС	УС	Ст.	Ст.	Ст.	Ст.
дверь	УС	УС	УС	Ст. +Al	Ст. +Al	Ст. +Al
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
► Габаритные параметры, см						
изделие, Д×Ш×В	63,5×63,5×46,6	100×35×46,6	100×35×46,6	50×35×46,6	50×35×46,6	63,5×63,5×46,6
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
дверь, Ш×В×Т	1 шт., распашная: 35,4×41,6×1,5	2 шт., распашные: 47,7×42,2×1,5	1 шт., подъёмная: 95×44,1×2	1 шт., распашная (рамка со стеклом): 45,5×42,1×2,1	1 шт., подъёмная (рамка со стеклом): 45×44,1×2,1	1 шт., распашная (рамка со стеклом): 30,2×41,6×2
полка, Ш×Г×Т×ВБ	1 шт., 89,5×67×0,13× 1,5	1 шт., 92,4×31,5×0,13× 1,5	1 шт., 95,3×30,6×0,5	1 шт., 42,4×30,9×0,5	1 шт., 45,3×30,6×0,5	1 шт., 89,5×67×0,5
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	—	29×3,0×1,5	—	29×3,0×1,5
упаковки, Д×Ш×В	64,5×64,5×47,6	101×36×47,6	101×36×47,6	51×36×47,6	51×36×47,6	64,5×64,5×47,6
замок (опционально), шт.	—	1	—	1	—	—
► Масса, кг						
изделия	16	17	17	12	12	16
брутто, не более	22	23	23	17	17	22
► Устанавливается на (см)						
навесная	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм
► Максимальная нагрузка, кг						
изделие	15	15	15	15	15	15
дверь	3	3	3	3	3	3
полка	10	10	5	5	5	5

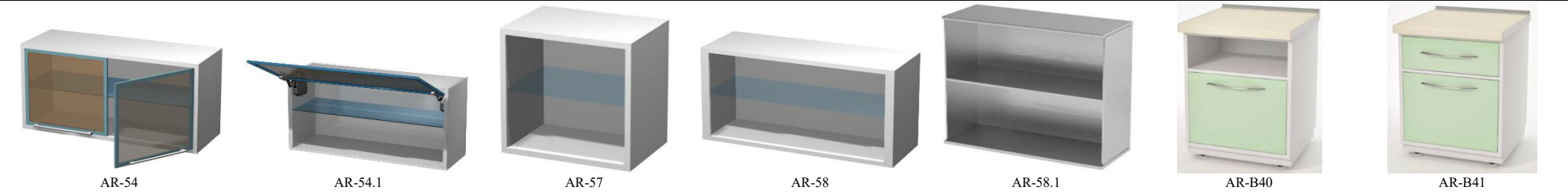

AR-54, AR-54.1, AR-57, AR-58, AR-58.1, AR-B40, AR-B41: технические параметры

Параметр	AR-54	AR-54.1	AR-57	AR-58	AR-58.1	AR-B40	AR-B41
► Материалы							
каркас	УС	УС	УС	УС	НС	УС	УС
столешница			—	—	—	ПФ	ПФ
дверь	Ст. +Al	Ст. +Al	—	—	—	УС	УС
полка	Ст.	Ст.	Ст.	Ст.	НС	УС	УС
ящик	—	—	—	—	—	—	УС
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	БП	КПЭП	КПЭП
► Габаритные параметры, см							
изделие, Д×Ш×В	100×35×46,6	100×35×46,6	50×35×46,6	100×35×46,6	46×35×69	46,5×48×60	46,5×48×60
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т			—	—	—	46,5×48×1,8	46,5×48×1,8
бортик столешницы, В	—	—	—	—	—	2 (опционально)	2 (опционально)
дверь, Д×В×Т	2 шт., распашные (рамка со стеклом): 47,6×42,1×2,1	1 шт., подъёмная (рамка со стеклом): 95×44,1×2,1	—	—	—	1 шт., распашная: 42×35,2×1,5	1 шт., распашная: 42×35,2×1,5
полка, Ш×Г×Т×Вб	1 шт.: 92,4×30,9×0,5	1 шт.: 95,3×30,6×0,5	1 шт.: 41,3×30×0,5	1 шт.: 91,3×30×0,5	1 шт.: 42×34×0,08× 1,5	1 шт.: 37,9×41,7×0,15× 1,5	1 шт.: 37,9×41,7×0,15× 1,5
ниша, Д×Ш×В	—	—	—	—	—	38,1×42,4×12,3	—
ящик, Ш×Г×В×Вф	—	—	—	—	—	—	38,0×36,8×6,7×12
ручка, Д×Ш×Г	29×3,0×1,5	—	—	—	—	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковки, Д×Ш×В	101×36×47,6	101×36×47,6	51×36×47,6	101×36×47,6	48×37×72	47,5×49×61	47,5×49×61
замок (опционально), шт.	1	—	—	—	—	1	1
► Масса, кг							
изделия	23	23	12	15	12	18,5	23,2
брутто, не более	29	29	13	16	15	27	31
► Устанавливается на (см)							
навесная	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	—
опоры, В×ø×Др, регулируемые	—	—	—	—	—	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
► Максимальная нагрузка, кг							
изделие	15	15	15	15	15	15	15
столешница	—	—	—	—	—	15	15
дверь	3	3	—	—	—	3	3
полка	5	5	5	5	10	10	10
ящик	—	—	—	—	—	—	15
► Усилия, Н (кгс)							
выдвигания ящика	—	—	—	—	—	—	не более 50 (5)

Инструкция по применению				TMB-006		
Тумба медицинская ARTINOX™				Страница	19 из 45	
 AR-B42  AR-B43  AR-B44  AR-E01  AR-E02  AR-TE02						
AR-B42, AR-B43, AR-B44, AR-E01, AR-E02, AR-TE02: технические параметры						
Параметр	AR-B42	AR-B43	AR-B44	AR-E01	AR-E02	AR-TE02
► Материалы						
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	НС
столешница	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	НС
ящик	—	УС	—	УС	—	—
дверь	УС	—	УС	—	УС	НС
полка	УС	—	УС	—	УС	НС
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	БП
► Габаритные параметры, см						
изделие, Д×Ш×В	46,5×48×60	46,5×48×60	50×50×(от 70 до 100)	50×60×90	50×60×90	50×60×90
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08
столешница, Д×Ш×Т	46,5×48×1,8	46,5×48×1,8	50×50×1,8	50×60×2,6	50×60×2,6	50×60×1,7
бортик столешницы, В	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2
дверь, Д×В×Т	1 шт., распашная: 42×44,2×1,5	—	1 шт., распашная: 45,5×44,2×1,5	—	1 шт., распашная: 45,5×72,8×1,5	1 шт., распашная: 49,5×77×1,3
ящик, Д×Ш×В×Вф	—	3 шт.: 36,7×38×6,7×14,6	—	4 шт. (1+3): 1: 41,6×43×30×36; 2-4: 41,6×43×6,7×12	—	—
полка, Д×Ш×Т×Вб	1 шт.: 37,9×41,7×0,15×1,5	—	1 шт.: 42,5×40×0,15×1,5	—	2 шт., металл: 42,2×48×0,13×1,5	2 шт., металл: 45,7×48×0,08
поворотный столик, Д×Ш×В	—	—	45×35×2,1	—	—	—
приемное отверстие для отходов гипса, ø или Д×Ш	—	—	—	20,8	20,8	20,8
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковки, Д×Ш×В, см	47,5×49×61	47,5×49×61	51×51×100	51×61×91	51×61×91	51×61×91
замок (опционально), шт.	1	1	1	1	1	—
► Масса, кг						
изделия	20,1	24,1	29,2	37	28,5	28,5
брутто, не более	21	25	31	39	30	30
► Регулировка						
поворотного столика от пола	—	—	от 70 до 100: винтовой механизм	—	—	—
► Устанавливается на (см)						
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 9,7×5,1×3
► Максимальная нагрузка, кг						
изделия	15	15	15	15	15	15
столешница	15	15	15	15	15	15
ящик	—	15	—	15	—	—
дверь	3	—	3	—	3	3
полка	10	—	10	—	10	10
► Усилия, Н (кгс)						
выдвигания ящика	—	не более 50 (5)	—	не более 50 (5)	—	—



AR-L041



AR-L041E



AR-L042



AR-L042E



AR-T24



AR-T24-1

AR-L041, AR-L041E, AR-L042, AR-L042E, AR-T24, AR-T24-1: технические параметры

Параметр	AR-L041	AR-L041E	AR-L042	AR-L042E	AR-T24	AR-T24-1
► Материалы						
каркаса	HC , УС	HC	HC	HC	HC	HC
столешница	HC	HC	—	—	HC	HC
дверь	УС	—	—	—	HC	HC
ящик	—	HC	—	—	—	—
мойка	HC	—	HC	HC	HC	HC
Покрытие	КПЭП	БП	БП	БП	БП	БП
► Габаритные параметры, см						
изделие, Д×Ш×В	60×60×90	90×51×90	80×62×120	160×62×120	100×60×90	100×60×90
каркас, Т	0,12	0,08	0,16	0,16	0,08	0,08
столешница, Д×Ш×Т	60×60×1,7	90×51×1,7	—	—	100×60×1,7	100×60×1,7
бортик столешницы, В	25	2	—	—	2	2
ящик, Д×Ш×В×Вф	—	5 шт. (4+1): 1-4: 39,8×43×13,6×18,6 5: 89,5×43×13,6×18,6	—	—	—	—
дверь, Д×В×Т	1 шт., распашная: 55,5×50,4×1,5	—	—	—	2 шт., распашная: 49,6×77×1,3	2 шт., распашная: 49,6×77×1,3
мойка, Д×Ш×Г	40×40×25	—	75×40×25	155×40×25	2 шт.: 40×40×25	2 шт.: 40×40×25
смеситель, В×ø	1 шт.: локтевой: 18,8×5	—	1 шт.: локтевой: 19,7×7,0	2 шт.: локтевой: 19,7×7,0	2 шт., локтевой: 18,8×5	1 шт., локтевой: 18,8×5
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	—	—	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковки, Д×Ш×В	62×62×92	92×53×92	62,5×81×79,5	165×70×125	102×62×92	102×62×92
замок (опционально), шт.	—	от 1 до 3	—	—	—	—
► Масса, кг						
изделия	26,5	45	32,1	70	42,4	42,2
брутто, не более	28	47	40	80	55	55
► Устанавливается на (см)						
навесная	—	—	Болт анкерный М8×10×80	Болт анкерный М8×10×80	—	—
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	—	—	—	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3
колеса, Т×ø	—	4 шт. (2 с тормозом): 2,4×7,5	—	—	—	—
► Максимальная нагрузка, кг						
изделия	20	15	20	20	15	15
столешница	20	20	—	—	15	15
дверь	3	—	—	—	3	3
ящик	—	15	—	—	—	—
мойка	20	—	—	—	20	20
► Усилия, Н (кгс)						
выдвигания ящика	—	не более 50 (5)	—	—	—	—
трогания	—	не более 75 (7.5)	—	—	—	—
включения блокировки	—	не более 100 (10)	—	—	—	—
перемещения при блокировке	—	не менее 120 (12)	—	—	—	—



AR-T01, AR-T02, AR-T03, AR-T04, AR-T04-1, AR-T09: технические параметры

Параметр	AR-T01	AR-T02	AR-T03	AR-T04	AR-T04-1	AR-T09
► Материалы						
каркас	HC	HC	HC	HC	HC	HC
столешница	HC	HC	HC	HC	HC	HC
дверь	—	—	—	HC	HC	HC
ящик	HC	HC	HC	—	—	—
мойка	—	—	—	HC	HC	HC
покрытие	БП	БП	БП	БП	БП	БП
► Габаритные параметры, см						
изделие, Д×Ш×В	50×60×90	50×60×90	50×60×90	50×60×90	50×60×90	100×60×90
каркас, Т	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
столешница, Д×Ш×Т	50×60×1,7	50×60×1,7	50×60×1,7	50×60×1,7	50×60×1,7	100×60×1,7
бортик столешницы, В	2	2	2	2	2	2
ящик, Ш×Г×В×Вф	4 шт. 44,8×43×14,2×19,5	2 шт.: 44,8×43×33,1×38,4	3 шт.: 44,8×43×20,2×25,5	—	—	—
дверь, Д×В×Т	—	—	—	1 шт., распашная: 49,5×77×1,3	1 шт., распашная: 49,5×77×1,3	2 шт., распашная: 49,6×77×1,3
мойка, Д×Ш×Г	—	—	—	1 шт.: 49×49×16	1 шт.: 40×40×25	1 шт.: 49×49×16
смеситель, В×ø, мм	—	—	—	1 шт., локтевой: 18,8×5	1 шт., локтевой: 18,8×5	1 шт., локтевой: 18,8×5
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	51×61×91	51×61×91	51×61×91	51×61×91	51×61×91	101×61×91
замок (опционально), шт.	от 1 до 3	1	от 1 до 3	—	—	—
► Масса, кг						
изделия	39,5	33,3	36,6	32	32	42
брутто, не более	41	35	38	34	34	53
► Устанавливается на (см)						
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3
► Максимальная нагрузка, кг						
изделие	25	25	25	25	25	25
столешница	15	15	15	15	15	15
дверь	—	—	—	3	3	3
ящик	8	8	8	—	—	—
мойка	—	—	—	20	20	20
► Усилия, Н (кгс)						
выдвигания ящика	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	—	—



AR-T04Y, AR-T05, AR-T05Y, AR-T06, AR-T07, AR-T08: технические параметры

Параметр	AR-T04Y	AR-T05	AR-T05Y	AR-T06	AR-T07	AR-T08
► Материалы						
каркас	HC	HC	HC	HC	HC	HC
столешница	HC	HC	HC	HC	HC	HC
дверь	HC	HC	HC	HC	HC	—
ящик	—	—	—	—	—	HC
полка	—	HC	HC	HC	—	—
мойка	HC	—	—	—	HC	—
покрытие	БП	БП	БП	БП	БП	БП
► Габаритные параметры, см						
изделие, Д×Ш×В	84,5×84,5×90	50×60×90	84,5×84,5×90	100×60×90	100×60×90	100×60×90
каркас, Т	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
столешница, Д×Ш×Т	84,5×84,5×1,7	50×60×1,7	84,5×84,5×1,7	100×60×1,7	100×60×1,7	100×60×1,7
бортик столешницы, В	2	2	2	2	2	2
ящик, Ш×Г×В×Вф	—	—	—	—	—	3 шт.: 94,8×43×20,2×25,5
дверь, Ш×В×Т,	1 шт., распашная: 39,6×77×1	1 шт., распашная: 49,5×77×1,3	1 шт., распашная: 39,6×77×1	2 шт., распашная: 49,6×77×1,3	2 шт., распашная: 49,6×77×1,3	—
полка, Ш×Г×Т, мм	—	2 шт.: 45,7×48×0,08	1 шт.: 105×48×0,08	2 шт.: 95,7×48×0,08	—	—
мойка, Ш×Г×В	1 шт.: 49×49×16	—	—	—	2 шт.: 49×49×16	—
смеситель, В×ø	1 шт., локтевой: 18,8×5	—	—	—	2 шт., локтевой: 18,8×5	—
ручка, Д×Ш×Г	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
упаковка, Д×Ш×В	85×85×91	51×61×91	85×85×91	101×61×91	101×61×91	101×61×91
замок (опционально), шт.	—	1	—	1	—	от 1 до 3
► Масса, кг						
изделия	38,7	24,6	38,5	40,2	42,4	53,5
брутто, не более	45	31	45	53	55	66
► Устанавливается на (см)						
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3
► Максимальная нагрузка, кг						
изделие	15	15	15	15	15	15
столешница	15	15	15	15	15	15
дверь	3	3	3	3	3	—
ящик	—	—	—	—	—	15
полка	—	10	10	10	—	—
мойка	20	—	—	—	20	—
► Усилия, Н (кгс)						
выдвигания ящика	—	—	—	—	—	не более 50 (5)

Инструкция по применению				ТМВ-006		
Тумба медицинская ARTINOX™				Страница		23 из 45
 AR-T19  AR-T28  AR-01-1  AR-02-1  AR-04-1  AR-04Y-1						
AR-T19, AR-T28, AR-01-1, AR-02-1, AR-04-1, AR-04Y-1: технические параметры						
Параметр	AR-T19	AR-T28	AR-01-1	AR-02-1	AR-04-1	AR-04Y-1
► Материалы						
каркас	НС	НС	УС	УС	УС	УС
столешница	НС	НС	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ
дверь	НС	Ст.+Al	—	—	УС	УС
ящик	НС	—	УС	УС	—	—
полка	НС	НС	—	—	—	—
мойка	—	—	—	—	НС	НС
покрытие	БП	БП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
► Габаритные параметры, см						
изделия, Д×Ш×В	50×60×90	100×60×90	50×60×90	50×60×90	50×60×90	84,5×84,5×90
каркас, Т	0,08	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т	50×60×1,7	100×60×1,7	50×60×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6	84,5×84,5×2,6
бортик столешницы, В	2	2	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)
ящик, Ш×Г×В×Вф	1 шт.: 44,8×43×6,7×12	—	6 шт. (2+3+1): 1-2: 44,8×43×5,0×8; 3-5: 44,8×43×6,7×12; 6: 44,8×43×18,2×23,8	4 шт. (3+1): 1-3: 44,8×43×6,7×12 4: 44,8×43×35,2×40,3	—	—
дверь, Ш×В×Т,	1 шт., распашная: 49,5×64,8×1,3	2 шт., распашная: 49,6×77×2,1	—	—	1 шт., распашная: 49,5×77×1,5	1 шт., распашная 39,6×77×1
полка, Ш×Г×Т, мм	1 шт. 45,7×48×0,08	2шт. 95,7×48×0,08	—	—	—	—
мойка, Ш×Г×В	—	—	—	—	1 шт.: 49×49×16	1 шт.: 49×49×16
смеситель, В×ø	—	—	—	—	1 шт., локтевой: 18,8×5	1 шт., локтевой: 18,8×5
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8
упаковка, Д×Ш×В	52×62×92	102×62×92	52×64×92	52×64×92	52×64×92	85,5×85,5×91
замок (опционально), шт.	—	—	—	—	—	—
► Масса, кг						
изделия	35	49,8	47,3	46	30	35
брутто, не более	38	57	60	56	35	40
► Устанавливается на (см)						
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3
колеса, Т×ø	—	—	—	—	—	—
► Максимальная нагрузка, кг						
изделие	80	40	80	80	80	80
столешница	40	30	40	40	40	40
ящик	15	—	15	15	—	—
дверь	3	3	—	—	3	3
полка	10	10	—	—	—	—
мойка	—	—	—	—	20	20
► Усилия, Н (кгс)						
выдвигания ящика	не более 50 (5)	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	—




AR-05-1, AR-05Y-1, AR-06-1, AR-09-1, AR-11-1, AR-13-1, AR-14-1: технические параметры

Параметр	AR-05-1	AR-05Y-1	AR-06-1	AR-09-1	AR-11-1	AR-13-1	AR-14-1
► Материалы							
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС	УС
столешница	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ
дверь	УС	УС	УС	—	Ст. +А1	—	—
ящик	—	—	—	УС	—	УС	УС
полка	УС	УС	Ст.	—	Ст.	—	—
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
► Габаритные параметры, см							
изделия, Д×Ш×В	50×60×90	84,5×84,5×90	50×60×90	50×60×90	50×60×90	50×60×90	50×60×90
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т	50×60×2,6	84,5×84,5×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6	50×60×2,6
бортик столешницы, В	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)
дверь, Ш×В×Т	1 шт., распашная: 49,5×77×1,5	1 шт., распашная: 39,6×77×1	1 шт., распашная: 49,5×77×1,5	—	1 шт., распашная (рамка со стеклом): 49,5×77×2,1	—	—
ящик, Ш×Г×В×Вф	—	—	—	2 шт. (1+1) 1: 44,8×43×6,7×12 2: 44,8×43×20,2×25,5	—	2 шт.: 44,8×43×33,1×38,4	4 шт. (1+3): 1: 44,8×43×35,2×40,3 2-4: 44,8×43×6,7×12
полка, Ш×Г×Т×Вб ниша, Ш×В×Г	2 шт.: 45,7×48×0,13×1,5	1 шт.: 105×48×0,13×1,5	2 шт.: 45,7×47,4×0,5	—	2 шт.: 45,7×47,4×0,5	—	—
ручка, Д×Ш×Т	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8	46×37×48,5	—	—	—
упаковки, Д×Ш×В	52×62×92	85,5×85,5×91	52×62×92	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8
замок (опционально), шт.	—	—	—	52×62×92	52×62×92	52×62×92	52×62×92
► Масса, кг							
изделия	35	39,8	35	30	32	35	42
брутто, не более	38	43	38	33	35	37	45
► Устанавливается на (см)							
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3
► Максимальная нагрузка, кг							
изделие	80	80	80	80	80	80	80
столешница	40	40	40	40	40	40	40
дверь	3	3	3	—	3	—	—
ящик	—	—	—	15	—	20	20
полка	10	10	5	—	5	—	—
► Усилия, Н (кгс)							
выдвигания ящика	—	—	—	не более 50 (5)	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)



AR-24-1, AR-24-2, AR-25-1, AR-26-1, AR-27-1, AR-28-1, AR-29-1: технические параметры

Параметр	AR-24-1	AR-24-2	AR-25-1	AR-26-1	AR-27-1	AR-28-1	AR-29-1
► Материалы							
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС	УС
столешница	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ	ПФ
ящик	—	—	—	—	—	—	УС
дверь	УС	УС	УС	УС	УС	Ст. +Al	—
полка	—	—	УС	—	—	Ст.	—
мойка	НС	НС	—	НС	НС	—	—
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
► Габаритные параметры, см							
изделия, Д×Ш×В	100×60×90	100×60×90	100×60×90	100×60×90	100×60×90	100×60×90	100×60×90
каркас, Т	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
столешница, Д×Ш×Т	100×60×2,6	100×60×2,6	100×60×2,6	100×60×2,6	100×60×2,6	100×60×2,6	100×60×2,6
бортик столешницы, В	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)	2 (опционально)
ящик, Ш×Г×В×Вф	—	—	—	—	—	—	3 шт.: 94,8×43×20,2×25,5
дверь, Ш×В×Т	2 шт., распашные: 49,6×77×1,5	2 шт., распашные: 49,6×77×1,5	2 шт., распашные: 49,6×77×1,5	2 шт., распашные: 49,6×77×1,5	2 шт., распашные: 49,6×77×1,5	2 шт., распашная (рамка со стеклом): 49,6×77×2,1	—
полка, Ш×Г×Т×Вб	—	—	2 шт.: 95,7×48×0,13×1,5	—	—	2 шт.: 95,6×47,4×0,5	—
мойка, Ш×Г×В	2 шт.: 49×49×16	2 шт.: 49×49×16	—	1 шт.: 49×49×16	1 шт.: 49×49×16	—	—
смеситель, В×ø	1 шт., локтевой: 18,8×5	2 шт., локтевой: 18,8×5	—	1 шт., локтевой: 18,8×5	1 шт., локтевой: 18,8×5	—	—
ручка, Д×Ш×Т	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8	35×2,5×0,8
упаковка, Д×Ш×В	102×62×92	102×62×92	102×62×92	102×62×92	102×62×92	102×62×92	102×62×92
замок (опционально), шт.	—	—	—	—	—	—	—
► Масса, кг							
изделия	40	40	31	32,5	32,5	49,8	63,3
брутто, не более	60	60	40	40	40	57	70
► Устанавливается на (см)							
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3	4 шт.: 9,7×5,1×3
колеса, Т×ø	—	—	—	—	—	—	—
► Максимальная нагрузка, кг							
изделие	40	40	40	40	40	40	40
столешница	30	30	30	30	30	30	30
ящик	—	—	—	—	—	—	15
дверь	3	3	3	3	3	3	—
полка	—	—	10	—	—	5	—
мойка	20	20	—	20	20	—	—
► Усилия, Н (кгс)							
выдвигания ящика	—	—	—	—	—	—	не более 50 (5)

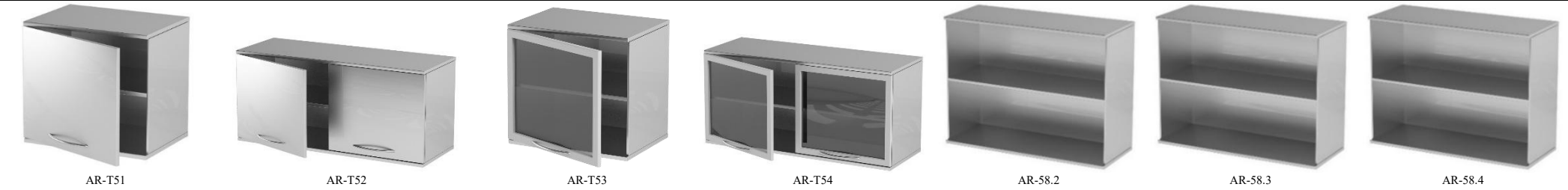

AR-T51, AR-T52, AR-T53, AR-T54, AR-58.2, AR-58.3, AR-58.4: технические параметры

Параметр	AR-T51	AR-T52	AR-T53	AR-T54	AR-58.2	AR-58.3	AR-58.4
► Материалы							
каркас	HC	HC	HC	HC	HC	HC	HC
полка	HC	HC	HC	HC	HC	HC	HC
дверь	HC	HC	Ст. +Al	Ст. +Al	—	—	—
покрытие	БП	БП	БП	БП	БП	БП	БП
► Габаритные параметры, см							
изделия, Д×Ш×В	50×35×46,6	100×35×46,6	50×35×46,6	100×35×46,6	92×35×69	120×35×69	150×35×69
каркас, Т	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
дверь, Ш×В×Т	1 шт., распашная: 49,5×46×1,3	2 шт., распашные: 49,6×46×1,3	1 шт., распашная (рамка со стеклом): 49,5×46×2,1	2 шт., распашные (рамка со стеклом): 49,6×46×2,1	—	—	—
полка, Ш×Г×Т×ВБ	1 шт.: 45,7×31,5×0,08×1,5	1 шт.: 95,7×31,5×0,08× 1,5	1 шт.: 45,7×31,5×0,08× 1,5	1 шт.: 95,7×30,9×0,08× 1,5	1 шт.: 88×34×0,08× 1,5	1 шт.: 116×34×0,08× 1,5	1 шт.: 146×34×0,08× 1,5
ручка, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	—	—	—
упаковки, Д×Ш×В	51×36×47,6	101×36×47,6	51×36×47,6	101×36×47,6	94×37×71	122×37×71	152×37×71
замок (опционально), шт.	—	—	—	—	—	—	—
► Масса, кг							
изделия	15	17	12	23	20	25	32
брутто, не более	20	23	17	29	23	28	35
► Устанавливается на (см)							
навесная	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм	Дюбель-гвоздь 6×60 мм Дюбель-гвоздь 6×80 мм
► Максимальная нагрузка, кг							
изделие	20	15	15	15	15	15	15
дверь	3	3	3	3	—	—	—
полка, Ме	10	10	10	10	10	10	10

Инструкция по применению	ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™	Страница	28 из 45

7 Ввод в эксплуатацию

В данном разделе приведены основные требования для правильного ввода в эксплуатацию изделия, чтобы обеспечить его безопасную и долговременную эксплуатацию.

	Рекомендуем, чтобы монтажом изделия занимался квалифицированный технический персонал с соблюдением требований по безопасности, принятыми в ЛПУ, либо обращайтесь к уполномоченному представителю или производителю для получения консультации и технической поддержки.
---	--

7.1 Ввод в эксплуатацию изделия

После доставки изделия в ЛПУ выполните следующие действия:

7.1.1 Проверка комплектности и внешнего вида

Сверьте фактическую комплектацию изделия с сопроводительными документами (накладная, паспорт/эксплуатационная документация).

Осмотрите изделие и съёмные элементы на наличие видимых механических повреждений, следов деформаций, коррозии, нарушений покрытий, повреждений обивки, а также повреждений упаковки, которые могли повлиять на сохранность изделия при транспортировании.

При выявлении серьёзных повреждений, влияющих на безопасность, эксплуатация изделия не допускается до проведения оценки технического состояния и, при необходимости, ремонта или замены.

7.1.2 Сборка изделия

Изделие поставляется в собранном виде, дополнительная сборка не требуется; при необходимости допускается установка регулируемых опор и/или аксессуаров согласно паспорту.

7.1.3 Размещение изделия

Осторожно переместите изделие в предполагаемое место эксплуатации, учитывая:

- удобство подъезда и маневрирования для медицинского персонала;
- соблюдение требований по пожарной безопасности и эвакуационным путям.

Установите изделие на ровный участок пола, убедившись, что все опоры (и/или колёса для мобильных моделей) находятся в одной плоскости и отсутствует заметный перекося или зазор между опорами и поверхностью пола. При наличии регулируемых опор выполните при необходимости их регулировку для обеспечения устойчивости изделия.

7.1.4 Установка съёмных элементов

Установите на изделие все предусмотренные конструкцией съёмные элементы в соответствии с эксплуатационной документацией.

Съёмные элементы должны быть установлены без люфтов и самопроизвольных перемещений при лёгком покачивании.

7.2 Предэксплуатационная проверка

Перед первым использованием изделия выполните проверку работоспособности основных узлов:

7.2.1 Проверка колёсных опор и хода

Для моделей изделия на колёсных опорах переместите изделие по ровной поверхности, оцените плавность хода, отсутствие заеданий, посторонних шумов и выраженного люфта колёс.

Убедитесь в отсутствии видимых повреждений колёсных блоков, шин и элементов крепления колёс.

7.2.2 Проверка тормозных устройств

Для моделей изделия с тормозными устройствами на колёсах поочерёдно включите и выключите тормоза, убедитесь:

в чётком срабатывании механизма (педаль/рычаги фиксируются в рабочих положениях);

- в надёжной фиксации изделия в неподвижном состоянии на ровной поверхности при включённых тормозах;
- в отсутствии самопроизвольного скатывания изделия при лёгком толчке при включённых тормозах.

7.2.3 Проверка устойчивости и целостности конструкции

Визуально осмотрите несущую раму, корпус, верхнюю поверхность (столешницу), полки, выдвижные ящики, сварные швы и крепёжные элементы на предмет трещин, деформаций, следов коррозии и ослабленных соединений.

Лёгким усилием проверьте отсутствие чрезмерного люфта и расшатывания элементов конструкции.

Инструкция по применению	ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™	Страница	29 из 45

7.2.4 Проверка работы подвижных и фиксирующих элементов

Для моделей изделия с регулируемыми или подвижными элементами проверьте:

- плавность перемещения без заеданий и перекосов;
- надёжность фиксации в рабочих положениях;
- отсутствие самопроизвольного изменения положения.

7.2.5 Подготовка к первому использованию

При необходимости очистите наружные поверхности изделия от пыли и следов транспортировки в соответствии с разделом «Очистка и дезинфекция».

Ознакомьте персонал с расположением органов управления, а также с основными мерами предосторожности при эксплуатации.

7.3 Информирование и обучение персонала

До начала эксплуатации изделием должны пользоваться только лица, ознакомленные с инструкцией по применению и локальными инструкциями ЛПУ по безопасной организации рабочих мест, размещению инструментов и материалов, безопасному обращению с мебелью в медицинских кабинетах.

Рекомендуется провести вводный инструктаж для медицинского персонала с демонстрацией:

- правила размещения и сортировки инструментов, материалов и оборудования на изделии;
- правил включения и выключения тормозных устройств на колёсных опорах (при их наличии);
- особенностей перемещения мобильных моделей изделия на колёсах внутри помещения, в том числе через пороги и стыки пола;

Факт проведения инструктажа рекомендуется фиксировать в установленном в медицинской организации порядке.

7.4 Поддержка

Если у вас возникли вопросы или потребовалась поддержка, свяжитесь с нашим уполномоченным представителем для получения дополнительной информации или консультаций.

Изделия поставляются в собранном виде.

Инструкция по применению	ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™	Страница	30 из 45

8 Применение изделия

8.1 Общие положения

	К эксплуатации изделия допускается только обученный медицинский персонал, ознакомленный с инструкцией, локальными инструкциями по безопасной эксплуатации изделия. Пациенты и их представители не являются пользователями (операторами) изделия.
---	--

Перед каждым применением изделия необходимо выполнить предэксплуатационный осмотр и проверки, указанные в разделе «Ввод в эксплуатацию» и «Меры предосторожности».

8.2 Подготовка изделия к применению

Перед размещением проведением процедур с использованием изделия выполните следующие действия:

1. Установите изделие на ровной, твёрдой и чистой поверхности, убедившись, что все опоры или колёса (для мобильных моделей) находятся в одной плоскости.
2. При наличии колесных опор включите тормозные устройства на предусмотренных колёсах, зафиксировав изделие в неподвижном состоянии.
3. Проверьте:
 - целостность несущего каркаса, верхней рабочей поверхности (столешницы), полок, выдвижных элементов и облицованных поверхностей (при наличии обивки);
 - отсутствие видимых трещин, деформаций, выраженной коррозии и иных повреждений;
 - исправность подвижных, выдвижных и фиксирующих механизмов (полки, выдвижные ящики, дополнительные модули — для соответствующих моделей).
4. Установите съёмные элементы изделия (полки, выдвижные ящики) в рабочее положение и убедитесь в их надёжной фиксации и отсутствии самопроизвольных перемещений.
5. При необходимости подготовьте расходные материалы (одноразовые простыни, салфетки и иные укрывные материалы) в соответствии с локальными инструкциями.

При обнаружении дефектов, влияющих на безопасность, эксплуатация изделия не допускается до устранения неисправностей.

8.3 Тумба медицинская (стационарные)

8.3.1 Подготовка к использованию

- Установите тумбу на ровной, твёрдой и чистой поверхности пола.
- При наличии регулируемых опор отрегулируйте их так, чтобы все опоры устойчиво опирались на пол, без перекаса.
- Проверьте:
 - целостность несущего каркаса, верхней рабочей поверхности (столешницы), полок, выдвижных ящиков;
 - отсутствие трещин, деформаций, выраженной коррозии, сколов и отслоений покрытия, острых кромок;
 - исправность подвижных и выдвижных элементов (ящики, дополнительные полки, модули) и их фиксации в закрытом/рабочем положении.
- Установите съёмные элементы (полки, ящики, дополнительные модули) в рабочее положение и убедитесь в их надёжной фиксации.
- При необходимости застелите рабочую поверхность одноразовыми или многоразовыми укрывными материалами в соответствии с локальными требованиями.
- При обнаружении дефектов, способных повлиять на безопасность или устойчивость, эксплуатация тумбы не допускается до устранения неисправностей.

8.3.2 Использование по назначению

- Размещайте инструменты, материалы и оборудование в соответствии с их массой и частотой использования: более тяжёлые предметы — на нижних полках и в нижних ящиках, лёгкие — на верхних.
- Равномерно распределяйте нагрузку по столешнице и полкам, избегая сосредоточения тяжёлых предметов на краях.
- При работе с жидкостями и реактивами размещайте их так, чтобы минимизировать риск пролива на края и пол.

Инструкция по применению	ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™	Страница	31 из 45

- Для моделей со встроенной мойкой:
 - используйте мойку в соответствии с назначением (мытьё рук, инструментов, посуды, санитарная обработка);
 - не превышайте допустимую нагрузку на мойку и прилегающие поверхности;
 - избегайте попадания в слив крупных твёрдых предметов.

8.3.3 Ограничения и меры безопасности при эксплуатации

- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на тумбу в целом и на отдельные элементы (столешницу, полки, ящики, стеллаж, мойку), указанную в технических характеристиках.
- Не используйте тумбу как:
 - подмости, стремянку или платформу для стояния;
 - сиденье для персонала или посетителей;
 - опору для подъёма и подтягивания.
- Не опирайтесь всем весом на выдвинутые ящики, полки или стеллажи.
- При появлении признаков деформации, расшатывания или перекоса конструкции выведите тумбу из эксплуатации до устранения причин.

8.4 Тумба медицинская (на колёсах, с регулировкой высоты)

8.4.1 Подготовка к использованию

- Установите тумбу на ровной, твёрдой и чистой поверхности пола.
- Для моделей на колёсах:
 - проверьте целостность колёс и надёжность их крепления;
 - убедитесь в исправности тормозных устройств.
- Проверьте:
 - целостность каркаса, верхней рабочей поверхности (столешницы), полок, ящиков (если предусмотрены);
 - отсутствие трещин, деформаций, выраженной коррозии, острых кромок;
 - исправность механизма регулировки высоты (для соответствующих моделей) и выдвижных/подвижных элементов.
- При необходимости отрегулируйте высоту тумбы (для моделей с регулировкой), затем зафиксируйте её штатными элементами.
- При обнаружении дефектов, влияющих на устойчивость или возможность безопасного размещения инструментов и материалов, эксплуатация тумбы не допускается до устранения неисправностей.

8.4.2 Эксплуатация

- Размещайте инструменты и материалы так, чтобы более тяжёлые предметы располагались ближе к центру рабочей поверхности (столешницы) или на нижних полках/в ящиках.
- Не перегружайте столешницу и полки сверх указанной максимальной нагрузки.
- Для моделей с выдвижными ящиками:
 - выдвигайте ящики плавно, без рывков;
 - избегайте одновременного полного выдвижения нескольких ящиков, если это может ухудшить устойчивость.
- Для мобильных моделей:
 - при выполнении манипуляций фиксируйте колёса тормозами;
 - при перемещении тумбы контролируйте скорость, избегайте резких рывков и наездов на препятствия.

8.4.3 Ограничения и меры безопасности при эксплуатации

- Не используйте тумбу как опору для сидения, стояния или подъёма.
- Не опирайтесь всем весом на столешницу или выдвинутые элементы.
- Не размещайте на тумбе тяжёлое оборудование, масса которого превышает допустимую нагрузку для столешницы или полок.
- При перемещении тумбы с размещёнными на нём предметами:
 - перемещайте плавно, контролируя устойчивость;
 - при необходимости удерживайте тумбу за предусмотренные для этого элементы (ручки, края каркаса)
 - избегайте перемещения по лестничным маршам и резким перепадам высоты пола.

Инструкция по применению	ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™	Страница	32 из 45

8.5 Действия после завершения применения

После каждого использования изделия:

1. Снимите и утилизируйте одноразовые материалы (простыни, пелёнки и др.), если они использовались при проведении процедур, в соответствии с локальными правилами обращения с медицинскими отходами.
2. Проведите очистку и дезинфекцию изделия в соответствии с разделом «Дезинфекция, очистка и уход за изделием» и локальными инструкциями, особенно тщательно обработав поверхности, на которые могли попасть биологические жидкости или загрязнения.
3. При выявлении повреждений, нарушений работы подвижных узлов, признаков коррозии или других дефектов, способных повлиять на безопасность, выведите изделие из эксплуатации до проведения оценки технического состояния и, при необходимости, ремонта или списания.
4. После высушивания разместите изделие в отведённом месте хранения, обеспечив свободный доступ для последующего использования и не загромождая эвакуационные пути.

8.6 Ограничения применения

1. Изделие предназначено только для:
 - организации рабочего места медицинского персонала;
 - размещения, хранения и сортировки медицинских инструментов, материалов и оборудования;
2. Изделие не предназначено для:
 - длительного пребывания пациентов в качестве поверхности для сидения;
 - использования в качестве подмошек, стремянки, подставки для тяжёлого оборудования, сиденья для персонала или посетителей;
 - перемещения по лестничным маршам и иным поверхностям, не предусмотренным инструкцией;
 - эксплуатации вне помещений медицинских и оздоровительных организаций, если иное не оговорено в документации.
3. Не допускается:
 - использование изделия пациентами, детьми или сопровождающими лицами самостоятельно, без участия медицинского персонала;
 - превышение максимально допустимой нагрузки, указанной изготовителем, на каждое комплектующее;
 - эксплуатация изделия при наличии видимых дефектов (трещины, деформации, выраженная коррозия, повреждения обивки, неработающие тормоза или колёсные опоры и т.п.);
 - использование съёмных элементов, не предназначенных для данного изделия или не одобренных изготовителем.

Эксплуатация изделия вне установленных диапазонов температуры, влажности и условий окружающей среды, а также применение дезинфицирующих средств, не рекомендованных изготовителем, может привести к снижению безопасности и сокращению срока службы изделия и не допускается.

Инструкция по применению	ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™	Страница	33 из 45

9 Перечень и описание материалов

Пациент не контактирует с изделием.

Сокращение материала (см. раздел 5)	Материал, марка	Производитель (страна)
Материалы не контактирующие с организмом пациента:		
труба профильная	Труба стальная, марка стали 08пс	ООО "Дмитровский металлоцентр", РФ.
нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь, марки AISI 304	ООО "МАРЧЕГАЛИЯ РУ", РФ
углеродистая сталь	Сталь холоднокатаная конструкционная, марка 08пс	ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ», РФ
алюминий	Алюминиевый сплав: 6060, 6063 (EN AE-6060, EN AW-6063)	ООО «АлюминТехно», РФ
краска порошковая эпоксидно-полиэфирная	Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная	ООО "МАВ", РФ
постформинг	Плиты древесно-стружечные облицованные тип «Постформинг»	ООО"СКИФ», РФ
Стекло	Стекло листовое особо прозрачное марки Ultraview	АО «Салаватстекло», РФ

Медицинский работник должен работать в перчатках.

Материалы биологического, животного происхождения не используются.

Лекарственные средства не используются

10 Дезинфекция, очистка и стерилизация

10.1 Дезинфекция

Периодически проводите дезинфекцию 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода, после чего промывайте чистой водой и высушивайте. Сроки очередной дезинфекции согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

Для потребителей РФ: дезинфекция осуществляется согласно требованиям МУ-287-113

10.2 Очистка

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань или губку, смоченную в мыльном растворе, избегая абразивных средств.

10.3 Стерилизация

Нестерильные изделия для многократного применения, устойчивые к дезинфекции.

Нестерильные, стерилизации не подлежат.

Инструкция по применению	ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™	Страница	34 из 45

11 Требования к техническому обслуживанию и ремонту

11.1 Техническое обслуживание

Наружные поверхности изделия должны регулярно осматриваться на наличие повреждений покрытия, следов коррозии, деформаций и других дефектов; при их обнаружении необходимо принять меры по устранению.

Крепёжные элементы подлежат периодической проверке на наличие ослабления и коррозии; при необходимости ослабленные соединения подтягиваются, повреждённый крепёж заменяется.

Не допускается ударное воздействие на конструкцию изделия, а также эксплуатация изделия при видимых деформациях каркаса, колёсных опор или элементов ограждения.

Следует избегать воздействия на изделие открытого огня, высоких температур и агрессивных сред, не предусмотренных производителем, а также превышения допустимой нагрузки.

Колёсные опоры и тормозные устройства подлежат регулярной проверке: ход колёс должен быть плавным, тормоза — обеспечивать надёжную фиксацию изделия в неподвижном состоянии. При выявлении заеданий, повышенного люфта или ухудшения торможения необходимо провести очистку, при необходимости — замену узлов.

Съёмные элементы должны периодически проверяться на целостность, надёжность фиксации и отсутствие повреждений, влияющих на безопасность пациента или возможность проведения дезинфекции.

Соблюдение указанных требований технического обслуживания обеспечивает сохранение эксплуатационных характеристик, долговечность и безопасность использования изделия.

11.2 Ремонт

Производитель обеспечивает в гарантийный период техническое обслуживание и бесплатный ремонт дефектов поставленных изделий, возникших по вине производителя, силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания.

В послегарантийный период производитель обеспечивает на договорной основе техническое обслуживание и ремонт поставленных изделий силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания.

Техническое обслуживание и ремонт могут выполняться как по месту эксплуатации изделия, так и на производственных (или сервисных) площадках службы технического обслуживания, в зависимости от сложности, объёма работ и возможностей транспортировки изделия.

Выполнение ремонтных работ, связанных с разборкой изделия, должно осуществляться только квалифицированным персоналом, допущенным к обслуживанию медицинской техники, в соответствии с конструкторской и эксплуатационной документацией производителя.

12 Утилизация

Изделия по окончании срока службы и при потере потребительских свойств должны утилизироваться их непосредственным правообладателем с учетом нормативных требований страны-применения и прочими действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских изделий и материалов, из которых они изготовлены.

Для потребителей РФ: нормативным документом является СанПиН 2.1.3684-21

Упаковку нового изделия утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Утилизацию неиспользованных изделий осуществляют в порядке, предусмотренном для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3614 и с инструкцией, действующей в лечебном учреждении.

Утилизацию использованных изделий осуществляют в порядке, предусмотренном для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3614-21 и с инструкцией, действующей в лечебном учреждении.

13 Перечень стандартов применяемых в инструкции

ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Инструкция по применению	ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™	Страница	36 из 45

14 Комплектация изделия

Тумба медицинская ARTINOX™

Модели:

	Комплектация изделия	Обозначение по тексту
1.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-01 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без; с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-01
2.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-02 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без; с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-02
3.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-03 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без; с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-03
4.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-04 в составе: – Тумба с мойкой: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-04
5.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-04B в составе: – Тумба с мойкой: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-04B
6.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-04D в составе: – Тумба с мойкой: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-04D
7.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-04Y в составе: – Тумба с мойкой угловая: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-04Y
8.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-04YB в составе: – Тумба с мойкой угловая: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-04YB
9.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-05 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без; с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-05
10.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-05Y в составе: – Тумба угловая: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-05Y
11.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-06 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без; с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-06

Инструкция по применению		ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™		Страница	39 из 45
	Комплектация изделия	Обозначение по тексту	
35.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-40 в составе: – Тумба медицинская: с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-40	
36.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-41 в составе: – Тумба медицинская: с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-41	
37.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-42 в составе: – Тумба медицинская: с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-42	
38.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-43 в составе: – Тумба медицинская: с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-43	
39.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-44 в составе: – Тумба медицинская: с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-44	
40.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-45 в составе: – Тумба анестезиолога: с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-45	
41.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-51 в составе: – Тумба навесная: с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-51	
42.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-51.1 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-51.1	
43.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-51Y в составе: – Тумба навесная угловая – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-51Y	
44.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-52 в составе: – Тумба навесная: с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-52	
45.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-52.1 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-52.1	
46.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-53 в составе: – Тумба навесная: с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-53	

Инструкция по применению		ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™		Страница	40 из 45
	Комплектация изделия	Обозначение по тексту	
47.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-53.1 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-53.1	
48.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-53Y в составе: – Тумба навесная угловая – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-53Y	
49.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-54 в составе: – Тумба навесная: с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-54	
50.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-54.1 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-54.1	
51.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-57 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-57	
52.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-58 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-58	
53.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-58.1 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-58.1	
54.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-B40 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без; с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-B40	
55.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-B41 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без; с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-B41	
56.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-B42 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без; с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-B42	
57.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-B43 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без; с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-B43	
58.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-B44 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без; с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-B44	

Инструкция по применению		ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™		Страница	41 из 45
	Комплектация изделия	Обозначение по тексту	
59.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-E01 в составе: – Тумба гипсовочная: столешница с бортиком или без; с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-E01	
60.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-E02 в составе: – Тумба гипсовочная: столешница с бортиком или без; с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-E02	
61.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-L041 в составе: – Тумба с мойкой – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-L041	
62.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-L041E в составе: – Тумба анестезиолога: с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-L041E	
63.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-L042 в составе: – Тумба умывальник – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-L042	
64.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-L042E в составе: – Тумба умывальник – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-L042E	
65.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T01 в составе: – Тумба медицинская: с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T01	
66.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T02 в составе: – Тумба медицинская: с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T02	
67.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T03 в составе: – Тумба медицинская: с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T03	
68.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T04 в составе: – Тумба с мойкой – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T04	
69.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T04Y в составе: – Тумба с мойкой угловая – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T04Y	
70.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T05 в составе: – Тумба медицинская: с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T05	

Инструкция по применению		ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™		Страница	42 из 45

	Комплектация изделия	Обозначение по тексту
71.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T05Y в составе: – Тумба угловая – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T05Y
72.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T06 в составе: – Тумба медицинская: с предустановленным замком, либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T06
73.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T07 в составе: – Тумба с мойкой – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T07
74.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T08 в составе: – Тумба медицинская: с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T08
75.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T09 в составе: – Тумба с мойкой – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T09
76.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T19 в составе: – Тумба медицинская – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T19
77.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T28 в составе: – Тумба медицинская – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T28
78.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-TE02 в составе: – Тумба гипсовочная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-TE02
79.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T51 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T51
80.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T52 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T52
81.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T53 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T53
82.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T54 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T54
83.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-58.2 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-58.2

Инструкция по применению		ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™		Страница	43 из 45

	Комплектация изделия	Обозначение по тексту
84.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-58.3 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-58.3
85.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-58.4 в составе: – Тумба навесная – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-58.4
86.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T04-1 в составе: – Тумба с мойкой – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T04-1
87.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T24 в составе: – Тумба с мойкой – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T24
88.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-T24-1 в составе: – Тумба с мойкой – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-T24-1
89.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-24/1 в составе: – Тумба с мойкой: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-24/1
90.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-01-1 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-01-1
91.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-02-1 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-02-1
92.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-04-1 в составе: – Тумба с мойкой: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-04-1
93.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-04Y-1 в составе: – Тумба с мойкой угловая: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-04Y-1
94.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-05-1 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-05-1
95.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-05Y-1 в составе: – Тумба угловая: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-05Y-1
96.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-06-1 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-06-1

Инструкция по применению		ТМВ-006	
Тумба медицинская ARTINOX™		Страница	45 из 45

	Комплектация изделия	Обозначение по тексту
110.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-26-1 в составе: – Тумба с мойкой: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-26-1
111.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-27-1 в составе: – Тумба с мойкой: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-27-1
112.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-28-1 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-28-1
113.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-29-1 в составе: – Тумба медицинская: столешница с бортиком или без – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-29-1
114.	Тумба медицинская ARTINOX™, модель AR-45-1 в составе: – Тумба анестезиолога: с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-45-1

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

45 (сорок пять) листов

Генеральный директор
ООО «АВ ТРАСТ»

А.В. Якимович

